

Multi Chair Fastener

Sistema di bloccaggio per sedie portantine

Multi Chair Fastener cod. 21-0180-006



Multi Chair Fastener cod. 21-0180-006

Multi Chair Fastener

Un unico bloccaggio per molteplici sedie. Massima sicurezza, massima praticità.

Con il rivoluzionario sistema di bloccaggio Multi Chair Fastener – Certificato 10G – è possibile bloccare a bordo dell'ambulanza qualsiasi sedia, motorizzata e non, grazie alla multi compatibilità dell'aggancio. Pratico, intuitivo e sicuro.

Con quali sedie è compatibile il Multi Chair Fastener?

Il nuovo bloccaggio è adoperabile con tutte le sedie Ferno, ma non solo.
È compatibile con i seguenti modelli:

**Tutta la linea Ferno Venice: Venice Base, Venice Plus, Venice Power;
Ferno Ezglide Power;
Ferno 59-T;
La linea 42: le sedie 42-E e 42-EV;**

***Sei in possesso di una sedia di un altro brand? Nessun problema;
Il Multi Chair Fastener è compatibile anche con una vasta gamma di sedie di case produttrici differenti.***

PERCHÉ LAVORARE CON IL MULTI CHAIR FASTENER


È pratico e sicuro.

Il Multi Chair Fastener permette di bloccare in ambulanza la sedia in configurazione chiusa. In questo modo è possibile stoccarla in uno spazio ridotto ed in sicurezza: il certificato 10G garantisce la sua affidabilità. La cintura di contenimento assicura infine un'ulteriore stabilità.

È efficace.

Lo stoccaggio si effettua velocemente per tutte le sedie. La staffa di bloccaggio verticale è scorrevole e permette di regolare l'altezza grazie all'apposita maniglia rossa.

La staffa di bloccaggio consente infiniti livelli di adattabilità, a seconda dell'altezza del maniglione della sedia: la compatibilità con innumerevoli sedie di differenti marchi è garantita.

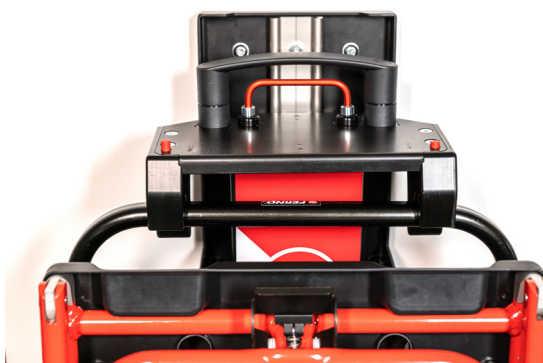

È intuitivo.

L'incavo presente sulla staffa di bloccaggio consente di ancorare facilmente il maniglione della sedia e la presenza di due indicatori di corretto aggancio assicura che l'operazione di bloccaggio è stata svolta correttamente.

Zero sforzi.

L'ancoraggio assicura di riporre la sedia in ambulanza facendo semplicemente scorrere le ruote negli appositi vani fissati a pavimento. Non è necessario sollevare la sedia!

E per estrarla dal supporto? Semplice, basterà sollevare la maniglia rossa della staffa di bloccaggio verticale.



LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MULTI CHAIR FASTENER

- Progettato per tutte le sedie Ferno e compatibile con sedie di altri marchi;
- Staffa di bloccaggio verticale scorrevole;
- Vani per le ruote fissati a pavimento;
- Cintura di contenimento compresa nel bloccaggio;
- Maniglia rossa ergonomica per regolare l'altezza;
- Indicatori di corretto aggancio;

2 anni di garanzia

CERTIFICAZIONI

- Certificato 10G.
- Certificato UNI EN 1789.
- Certificato UNI EN ISO 9001:2018
- Marchio CE.

BLOCCAGGIO DELLA SEDIA

Multi Chair Fastener è compatibile con una vasta gamma di sedie portantine presenti sul mercato.

1. Prima di stoccare la sedia portantina nel sistema di bloccaggio Multi Chair Fastener, chiuderla e bloccarla correttamente.
2. Spingere le ruote della sedia negli appositi vani posti alla base del sistema Multi Chair Fastener.
3. Posizionare la sedia in modo da collocarla al di sotto del maniglione del sistema Multi Chair Fastener.
4. Porre la sedia correttamente prestando la massima attenzione agli ingranaggi del cingolo della sedia.
5. Impugnare il maniglione principale tirando verso l'alto la leva rossa (fig.1), spingendo l'intero sistema verso il basso fino a raggiungere e bloccare la sedia (fig.2 /3).
6. Assicurarsi del corretto bloccaggio tramite gli indicatori rossi posti nella parte superiore del sistema di bloccaggio (fig.3).

N.B. quando entrambi gli indicatori rossi sono alzati, il sistema è correttamente bloccato.

7. Fissare infine la sedia con l'apposita cintura (fig.4).

fig.1



fig.2



fig.3


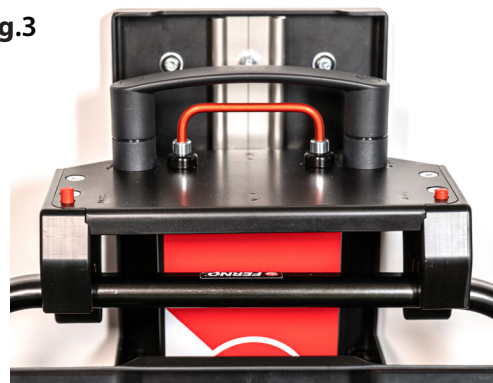


fig.4

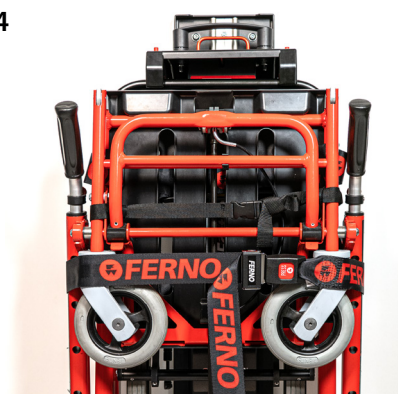

**SPECIFICHE TECNICHE SEDIA MULTI CHAIR FASTENER****cod. 21-0180-006**

Altezza	1154 mm
Larghezza	631 mm
Profondità	294,3 mm
Peso complessivo	11,5 kg

Multi Chair Fastener