

IL KIT CONTIENE:

Tirol Kit cod. 21-0120-023

In soli 10,8 Kg

1 LIGHT MULE
sistema monoruota ultra leggero

4 HANDLES
maniglie per Titan T

2 SS-SHOULDER SUPPORT
pettorine di sollevamento

1 BAG TIROL KIT
borsa di contenimento

Regolazione delle maniglie in **12 POSIZIONI** a seconda delle necessità, con possibilità di equipaggio lungo o corto per consentire il passaggio anche nei luoghi più stretti in totale sicurezza.

Le maniglie possono essere posizionate per supportare una posizione di stazionamento della barella fungendo da gambe per la struttura, ciò permette di poter operare sul paziente totalmente **SOLLEVATI DAL TERRENO**.

ShoulderSupport: spallacci semplici da applicare, regolabili e muniti di sistema ad alta visibilità, che consentono una più efficace distribuzione del peso da trasportare.

LEGGERO (peso totale kit 10,8 kg), divisibile tra più operatori e zainabile con minimo ingombro.

SISTEMA DI CHIUSURA BREVETTATO

conforme alla normativa 93/42

TITAN PROTECTION.

Speciale rivestimento a protezione del toboga Titan-T che permette il trascinarsi su diversi tipi di terreno in maniera sicura.

Tutto il kit è montabile in pochi secondi anche da un **SOLO OPERATORE**, e permette il montaggio della ruota di trasporto anche con paziente a bordo.

**DIVISIBILE
E
ZAINABILE**

**Capacità di carico
225 Kg**

**la più leggera
sul mercato
Solo 7 Kg**

Light Mule: sistema monoruota composto da supporto ruota pieghevole a "V" e bloccaggio fast clip. Equipaggiato con ruota ad alto carico e battistrada studiato per terreni montani, che permette anche su strade sterrate, di mantenere un'alta aderenza e manovrabilità.

struttura in TITANIO

Trattamento antiusura e antiabrasione delle parti metalliche con Niploy che garantisce alta durabilità nel tempo.




sviluppato in
collaborazione con:
Bergrettung
Tirol

Immagina fin dove puoi
spingerti **con solo 11 chili.**

Barella toboga Titan-TI

- ▶ Estremamente leggera - grazie alla struttura interamente in titanio e saldature TIG, il peso è dimezzato rispetto alle barelle in acciaio inossidabile.
- ▶ La rete in polietilene ad alta densità elimina il rischio di formazione della ruggine garantendo una maggiore resistenza e durata nel tempo.
- ▶ Il tubo superiore (25,4 mm) garantisce una presa più sicura e comoda, soprattutto nel caso di lunghi trasporti.
- ▶ Grazie al suo sistema di chiusura rapida è possibile assemblarla e disassemblarla in soli **15 secondi**.
- ▶ Mediante i punti di ancoraggio "StratLoadTM" la barella può essere rapidamente collegata alla sospendita per il sollevamento. Tali punti di ancoraggio garantiscono un trasporto in sicurezza senza il rischio di danneggiamento della struttura.

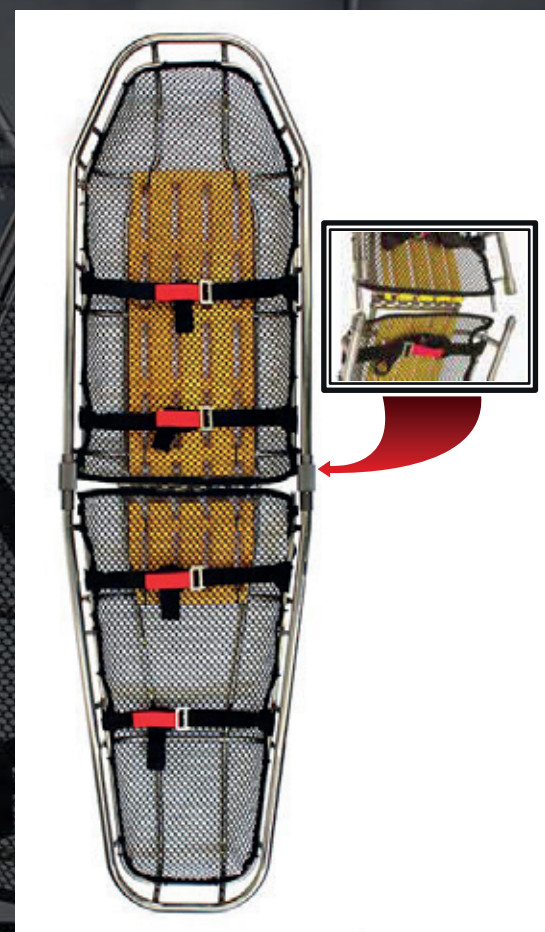

CERTIFICAZIONI:

- ▶ CE CLASSIFIED
- ▶ CERTIFIED CLASS 1



CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO	COEFFICIENTE DI CARICO
11-0119TIROL	Titan TI	60 cm	212 cm	18 cm	7 kg	1134 kg

ACCESSORI OPZIONALI

Titan Protection
cod. 21-0120-010

Titan Protection (divisibile)
cod. 21-0120-010_1




per maggiori informazioni
consultaci su
www.ferno.it

Ears (vela antirotazione)
cod. EARS



per maggiori informazioni
consultaci su
www.ferno.it

Sospendite
cod. 15-0108 (hard)
cod. 15-0109 (soft)

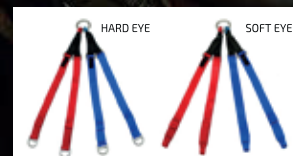

per maggiori informazioni
consultaci su
www.ferno.it

Bag Tirol Kit plus
cod. BAG TIROL KIT PLUS



per maggiori informazioni
consultaci su
www.ferno.it

Capotta di protezione
(travers rescue)
cod. 74000



per maggiori informazioni
consultaci su
www.ferno.it

consultaci con un
QR CODE READER



Numero Verde
800 501711

FERNO

Sede Legale e Uffici Commerciali
Via B. Zallone n. 26
40066 Pieve di Cento [Bo] | Italy
P +39 051 6860028 | F +39 051 6861508
info@ferno.it
www.ferno.it

FERNO