



CORTEX

Roll-In Multilevel Krankentrage




Artikelnummer: 21-00059



Die mehrstufige Krankentrage **Cortex** wurde konzipiert, um einen **sicheren Transport des Patienten** zum Rettungsfahrzeug zu gewährleisten. Sie ermöglicht das ordnungsgemäße Ein- und Ausladen ohne dafür Hebel betätigen zu müssen und verringert damit **den von den Rettungshelfern erforderlichen Kraftaufwand**.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- ▶ **Mehrstufig.** 5 Höhen sorgen dafür, dass der Rücken beim Heben nicht zu stark beansprucht wird und erleichtern damit die Rettungsmaßnahmen.
- ▶ **Leicht und robust.** Die Struktur aus eloxierter Aluminiumlegierung trägt bis zu 250 kg.
- ▶ **Hintere Rollen mit integriertem Feststeller.** Die hinteren Schwenkrollen mit einem Durchmesser von 150 mm sind mit einer Sicherheitsbremse ausgestattet, die unbeabsichtigte Bewegungen der Vorrichtung verhindert.
- ▶ **Schwenkrollen an der Kopfseite mit Richtungsblockierung.** Die vorderen Rollen mit einem Durchmesser von 150 mm können je nach Bedarf des Rettungshelfers mittels eines spezifischen Hebels auf eine feste Position oder als schwenkbar eingestellt werden. Dies ermöglicht ein seitliches Annähern an das Patientenbett und eine bessere Handhabung der Einrichtung in engen Räumen.
- ▶ **Lässt leichtes Ein-/Ausladen.** Das System Easy-Load ermöglicht das Einladen der Krankentrage, ohne dass irgendein Hebel betätigt werden muss, was das Manövrieren für den Patienten sicherer und für den Rettungshelfer einfacher gestaltet. Das Ausladen erfolgt dank des Fallschutzsystems sicher und risikofrei.
- ▶ **Verstellbare Rückenlehne.** Die Rückenlehne kann bis auf eine maximale Neigung von 80° verstellt werden.
- ▶ **Bequem für den Patienten.** Je nach Bedürfnissen des Patienten kann der Fußrahmen mit dem praktischen Hebel in die antalgische Lagerung (Contour-Position) oder aber in die Anti-Schock-Lagerung gebracht werden.
- ▶ **Als Tragbahre verwendbar.** Das Beinverriegelungssystem hält die Standfüße der Krankentrage in angehobener Position und verriegelt sie, so dass sie bei Hindernissen oder auf unwegsamem Gelände als Tragbahre verwendet werden kann.
- ▶ **Klappbare Seitenbügel.** Die Krankentrage wird standardmäßig mit einem Paar klappbarer Seitenbügel geliefert, die über den entsprechenden Stift gelöst werden können.
- ▶ Dank den starren ABS-Flächen **für Rettungsmanöver ausgelegt.**
- ▶ **Ermöglicht den Transport von Transportinkubatoren**, da sie mit der spezifischen ITC-Schnittstelle (Incubator Transport Interface) kompatibel ist.
- ▶ **Einfaches Reinigen.** Die Flächen aus ABS können entfernt werden, um das Reinigen zu vereinfachen.

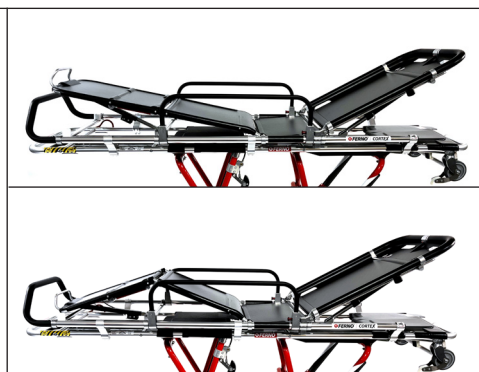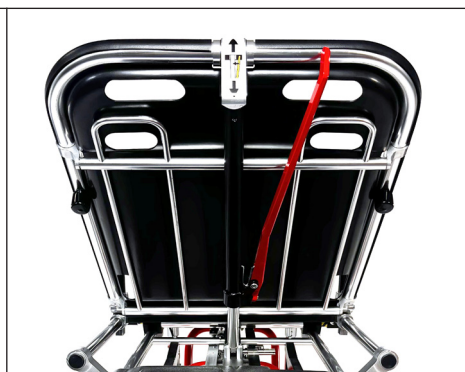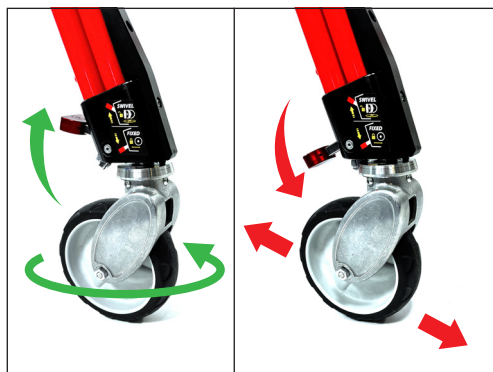

KOMPATIBLES ZUBEHÖR



► 5-teilige Matratze mit Kopfkissen

Artikelnummer: 25-00200

Die fünfteilige Matratze folgt den Neigungen des Rahmens in alle möglichen Positionen.

Die Matratze umfasst ein Kissen mit Gurten, die es ermöglichen, es nach hinten umzuschlagen, ohne es bei Nichtgebrauch zu verlieren.


► Surface Extender

Artikelnummer: 21-00066

Der Cortex Surface Extender ist ein Kit für die Vergrößerung der Liegefläche der Trage mit dem ScoopEXL und einer Luftmatratze.

Der Cortex Surface Extender besteht aus:

- vier Klemmen mit Verankerung für TSL - zwei auf der rechten und zwei auf der linken Seite der Krankentrage;
- zwei tragende seitliche Halter für Seitenbügel;
- aufblasbarer Zwei-Wege-Matratze mit aufblasbaren Stützkissen (4 Drei-Kammer-Kissen, 2 Ein-Kammer-Kissen);
- Aufpumpeinsatz;
- über USB-aufladbare elektrische Luftpumpe;
- Reparaturkit.

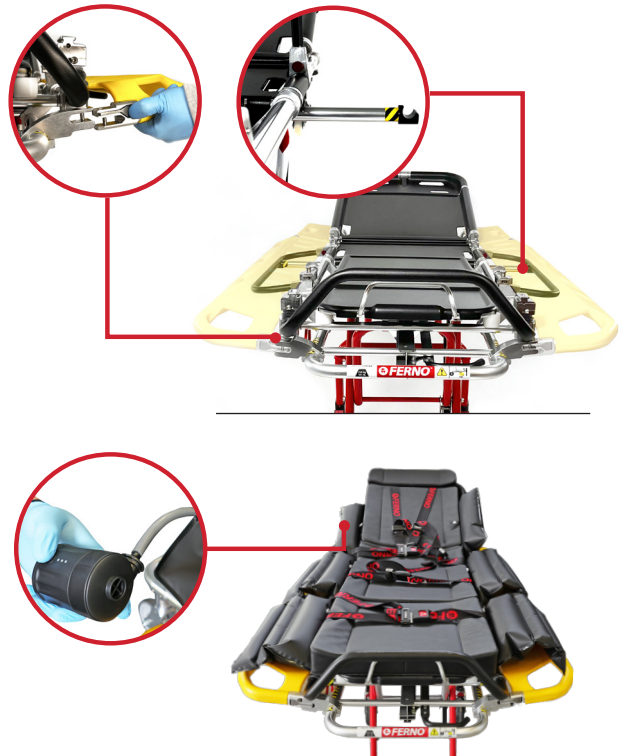

► Adapter Kit für PacRac+

Artikelnummer: 25-00214

Das Adapter Kit besteht umfasst vier Klemmen mit Verankerung für PacRac+, die bei Bedarf eine schnelle Installation ermöglichen.

WEITERES KOMPATIBLES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Vier-Punkt-Gurt	0313915
Zweiteiliger Gurt	430-2-N
Auflagematratze Safe Transfer Super Comfort	271029000
Aufblasbare Matratze	25-00259-M01
Pumpe zum Aufpumpen	10-00703
Aufpumpeinsatz	10-00694
PacRac+	FWEPR+IT
Infusionsständer (IV Pole)	0087156
Kit ScoopEXL gelb	KIT-SCOOPEXL
Kit ScoopEXL rot	21-00038
Einstellbare Verlängerungen für Tragengurte	0313659-IT
Emergency Kit (Notfallkit)	21-00026
Slam Halterungssystem	SLAM-5026/MONDIAL
ITC (Schnittstelle für die Befestigung eines Transportinkubators)	ITC-HL
Neomate (Kinder-Sicherheitsdecke)	0314116
Pedimate Plus (Kinder-Sicherheitsdecke)	0314115
Patient Shield	0822097
Kit Dokumentenhalter	25-00273

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	1970 mm
Breite	560 mm
Höhe	(maximal, bei aufgestellter Rückenlehne) 1500 mm
Gewicht	47 kg
Belastbarkeit	250 kg

ZERTIFIZIERUNG



Das Produkt entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen der **Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)**.

Ist der Norm **EN1865** konform und mit dem Halterungssystem SLAM für den Transport im Krankenwagen (gemäß **EN 1789** zertifiziertes System) kompatibel.