

CORTEX

Barella autocaricante multilivello

Codice: 21-00059







Cortex - Barella autocaricante multilivello











La barella multilivello **Cortex** è stata studiata per garantire il **trasporto in sicurezza del paziente** sul mezzo di soccorso. Permette una procedura di caricamento e scaricamento corretta senza l'azionamento di leve per **ridurre al minimo gli sforzi dell'operatore**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ▶ *Multilivello*. 5 altezze agevolano le procedure di soccorso per non gravare sulla schiena durante le manovre di sollevamento.
- Leggera e robusta. La struttura in lega di alluminio anodizzato e trasporta fino a 250 kg.
- ▶ **Ruote posteriori con freno integrato.** Le ruote posteriori di diametro 150 mm sono piroettanti e hanno un freno di sicurezza che impedisce movimenti accidentali del presidio.
- ▶ Ruote anteriori piroettanti con blocco direzionale. Le ruote anteriori di diametro 150 mm possono essere impostate come fisse o piroettanti, mediante l'utilizzo dell'apposita leva, secondo le necessità dell'operatore, in modo da permettere l'accostamento laterale al letto del paziente e una migliore gestione del presidio in spazi ristretti.
- ▶ Facile da caricare/scaricare. Il sistema Easy Load permette il caricamento della barella, senza la necessità di azionare alcuna leva, rendendo la manovra più sicura per il paziente e più agevole per l'operatore. Lo scaricamento è sicuro e senza rischi grazie al sistema di sicurezza anticaduta.
- **Schienale regolabile.** Lo schienale è regolabile fino al raggiungimento di un'inclinazione massima di 80°.
- ▶ **Comoda per il paziente**. A seconda delle esigenze del paziente, è possibile impostare il telaio piedi in posizione antalgica (Contour position) e in posizione antishock, grazie alla pratica leva.
- Utilizzabile come una portantina. Il sistema bloccagambe tiene sollevate e bloccate le gambe della barella così da utilizzarla come una portantina, in caso di ostacoli o terreno impervio.
- Spondine abbattibili. La barella viene fornita di serie con una coppia di spondine abbattibili, sbloccabili con l'apposito pin.
- **È pensata per eseguire manovre salvavita**, grazie ai piani rigidi in ABS.
- ▶ **Consente il trasporto di termoculle**, poiché è compatibile con l'interfaccia dedicata ITC (Incubator Transport Interface).
- **Semplice da pulire.** I piani in ABS possono essere rimossi per rendere la pulizia ancora più agevole.













ACCESSORI COMPATIBILI



Materasso a 5 sezioni con cuscino

Codice: 25-00200

Il materasso a cinque sezioni permette di seguire le inclinazioni del telaio in tutte le posizioni possibili.

Il materasso è comprensivo di cuscino con cinghiette, che permettono di ribaltarlo senza perderlo in caso di inutilizzo.


Surface Extender

Codice: 21-00066

Il Cortex Surface Extender è un kit per l'estensione della superficie di appoggio della barella tramite ScoopEXL e materasso gonfiabile.

Il Cortex Surface Extender si compone di:

- Quattro morsetti con aggancio per TSL, due sul lato destro e due sul lato sinistro della barella;
- Due supporti laterali portanti per spondine;
- Materasso gonfiabile a due vie con cuscini gonfiabili di appoggio (4 cuscini a tre camere, 2 cuscini ad una camera);
- Innesto di gonfiaggio;
- Pompa di gonfiaggio elettrica a ricarica USB.
- · Kit di riparazione.

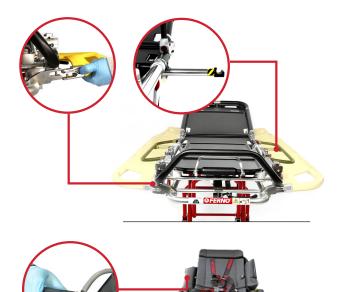



Adapter Kit per PacRac+

Codice: 25-00214

L'Adapter Kit si compone di quattro morsetti con aggancio per PacRac+ che ne permettono l'installazione veloce al bisogno.



ALTRI ACCESSORI COMPATIBILI

DESCRIZIONE	CODICE
Cintura a quattro punti	0313915
Cintura a due pezzi	430-2-N
Materasso Safe Transfer Super Comfort	271029000
Materasso gonfiabile	25-00259-M01
Pompa di gonfiaggio	10-00703
Innesto di gonfiaggio	10-00694
PacRac+	FWEPR+IT
Asta Porta Flebo (IV Pole)	0087156
Kit ScoopEXL giallo	KIT-SCOOPEXL
Kit ScoopEXL rosso	21-00038
Prolunghe regolabili per cinture per barella	0313659-IT
Emergency Kit	21-00026
Bloccaggio Slam	SLAM-5026/MONDIAL
ITC (Interfaccia per fissaggio Termoculle)	ITC-HL
Neomate (Sistema di trasporto pediatrico)	0314116
Pedimate Plus (Sistema di trasporto pediatrico)	0314115
Patient Shield	0822097
Kit portadocumenti	25-00273

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	1970 mm
Larghezza	560 mm
Altezza	(massima, con schienale alzato) 1500 mm
Peso	47 kg
Capacità di carico	250 kg

CERTIFICAZIONE



Il prodotto risponde ai requisiti generali di sicurezza e prestazione del **Regolamento (UE) 2017/745** (MDR) concernente i dispositivi medici.

Conforme alla norma **EN1865** e compatibile con il sistema di bloccaggio SLAM per il trasporto in ambulanza (sistema certificato **EN 1789**).